

画像解析ソフトImarisのリモートアクセス利用@TeamViewer【リモート接続利用方法】

2020.10.14 蛍光生体イメージング室

リモート接続前にやること


① 画像解析PCの予約(前日の17:00まで受付)

KUMACoから利用する画像解析ソフトを予約する。([KUMACoマイポータル](#))

② リモート接続用のPWを請求する。蛍光生体イメージング室(liveimaging.japan@gail.com)にメールする ↓ 折り返し画像解析PCリモート接続用のPWを連絡します。

TeamViewerでリモート接続

アプリのTeamViewerを起動して、左上のサインイン(ヒトのシルエットマーク) から登録ID(メールアドレス)とPWでサインインする

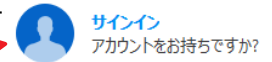

リモートコントロール

リモートコントロールを選択して

ImarisPCのパートナーIDを入力 → リモートコントロール のPWを入力する

↓

リモート接続が完了



画面について

リモート制御するPCのモニターに合わせて表示を切り替えてください。

切り替え方法：デスクトップで右クリック> ディスプレイ設定>

モニター 1：4Kモニタ 3840x2160

モニター 2：DELL E228WFP 1680 x 1050

* 4Kモニタで使用する場合は「1 のみに表示」、普通のモニタを使用する場合は「2 のみに表示」で切り替える



Imarisのツールウィンドウについて

リモート接続時、Display Adjustmentウィンドウが表示されなくなる場合があります。

Ctrl+CまたはEdit>Display Adjustmentにチェックが入っているか確認して下さい。

チェックしてあるのに表示されていない場合は、

①モニター1(4Kモニタ)のみに表示

②Display AdjustmentをImarisメインウィンドウ内に移動させる

③モニター2(通常モニタ)のみに表示切替える

※Imarisのメインウィンドウから離れた位置にあるとDisplay Adjustmentが表示されなくなることがあるため

データの転送について

リモート接続利用前に、

①解析PC本体へUSBメモリ、ディスク等を接続する、または ②解析PCのDドライブにダウンロードしてご利用ください。

ご利用後、①USBメモリ、ディスク等の回収、②解析PCのDドライブからデータを削除して下さい。

リモート接続の終了

利用終了後、TeamViewerアプリを閉じてリモート接続を終了する。コメントwindowが開くので、コメントを記入。

トラブル等あれば記入のこと。

注意事項

・予約終了時間になったら、速やかにTeamViewerのリモート接続を解除してください。

※制御する側orされる側のTeamViewerアプリを終了すると切断されます。

※特に、次の予約者がいる場合は、延長利用不可です。

・TeamViewerの使用はImarisPCへの接続以外の用途に使用しないでください。

・用途以外に使用された場合は、リモート接続利用を停止させていただきます。